



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

## CÁMARA DIGITAL DE TABLETA WIN11 DE 11,6", 16,0M

# A59.3





# CÁMARA DIGITAL DE TABLETA WIN11 DE 11,6", 16,0M

## A59.3

Sensor	Sensor Sony CMOS de 1/2,3"
Resolución	CMOS de 16M
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 11,6", resolución 1920x1080p IPS
UPC	Entre J4105
Sistema	Win10 64 bits
WIFI	WIFI 2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	bluetooth 4.2
Producción	USB3.0, HDMI, WIFI, Ethernet, fuente de alimentación tipo C
Tamaño de píxel	1.335x1.335um
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente DC 12V/2A, Entrada 100-240V AC
Función	Foto 16M, Video 1080p Full HD
	Ajuste: brillo, contraste, saturación, balance de blancos, exposición, supresión de parpadeo, nitidez, gamma, ganancia CB/Cr
	Interfaz de interfaz de usuario: control del mouse, pantalla táctil
	Almacenamiento de fotos, videos, vista previa, formato de tarjeta SD
Medida de ventanas	<b>Software de medición S-EYE:</b> <b>Longitud:</b> Longitud de línea recta, Longitud de línea discontinua, Longitud de curva, Distancia de línea paralela, Distancia de línea de punto, Longitud de línea <b>Geometría:</b> Círculo de radio, Círculo de dos puntos, Círculo de tres puntos, Círculo concéntrico, Círculo de radio, Círculo de dos puntos, Círculo de tres puntos <b>Área Geométrica:</b> polígono, cuadrado <b>Observación:</b> Coordenadas de puntos, cruces, sistemas de coordenadas, notas de texto <b>Software de medición profesional Image View</b>
Tamaño / Peso	Tamaño del producto 285x177x12,5 mm, peso neto 0,9 kg
Paquete estándar	Cámara LCD, adaptador de corriente DC12V
manual rapido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Primero, conecte el producto a la fuente de alimentación Tipo-C DC-12V</li><li>2. Después de conectar la fuente de alimentación, presione el botón de encendido y la luz azul del producto siempre estará encendida.</li><li>3. Haga doble clic en S-EYE Measure Software en el escritorio de Windows 10</li><li>4. Haga clic en "Abrir fuente de video" en el software S-EYE y elija la cámara YW1600</li><li>6. Mida y ajuste según sus necesidades.</li></ol>



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

## CÁMARA DIGITAL DE TABLETA WIN11 DE 11,6", 16,0M

# A59.3



11.6" LCD, Resolution 1920x1080p IPS Touch Screen Win10 Tablet




16.0 M Digital Camera All-in-One Design



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

## CÁMARA DIGITAL DE TABLETA WIN11 DE 11,6", 16,0M

### A59.3

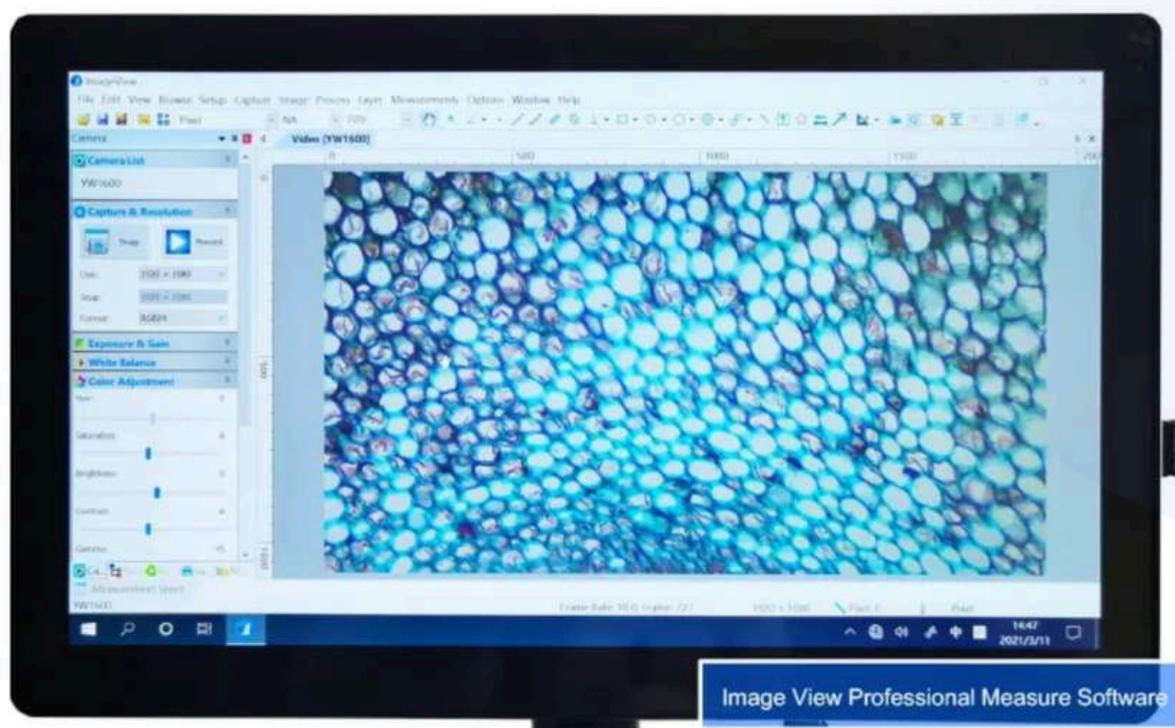



**ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S**  
La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

Actualmente nuestra empresa no solo distribuye equipos, también brinda soporte técnico y cuenta con equipos de medición debidamente verificados y calibrados, garantizando la conformidad de nuestros productos y servicios.

Con nuestra experiencia hemos logrado establecer relaciones comerciales con universidades, instituciones privadas y del estado. Nuestros productos y servicios son elaborados y prestados con los más altos estándares de calidad, motivo por el cual nos encontramos certificados bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.



**¡Contáctanos para  
más información!**

<https://advanced.com.co>  
[info@advanced.com.co](mailto:info@advanced.com.co)  
Teléfonos: 244 7917 - 572 2318  
Móvil: 316 438 4238

**Dirección: Carrera 32 # 24 - 06  
Barrio Gran América  
Bogotá - Colombia**