



中文 España Inglés

Buscar

CASA

SOBRE NOSOTROS

PRODUCTOS

SERVICIOS

NOTICIAS

CONTÁCTENOS



Accurate, Robust, Reliable
YIDI HISTOLOGY EQUIPMENT

MICROTOMO DE CONGELACIÓN

Criostato YD-1900

2013-11-26 10:36:50 2879



Especificaciones del producto :

- MPU (Microprocesador) Controla la temperatura y la pantalla LCD automáticamente, y controla la función de la sección y el recorte de forma semiautomática.
- Dos compresores para congelación (importados de Dinamarca). Cinco lugares de congelación: dos bandejas de congelación, portamuestras de congelación, caja de congelación, cuchillo de congelación.
- B diseño aerodinámico eautiful
- Función de retracción de la muestra, protege la muestra de lesiones con la cuchilla.
- Adopte un sistema de activación de importación anticipada para el avance del portamuestras.
- Función de descongelación
- Sistema de retracción automático por sección.
- Sistema de retracción automático para portamuestras.
- Sistema anti-roll que aplanla la loncha.
- corte la muestra plana, fina, uniforme y continua.



Fecha técnica:


- Temperatura de la caja de congelación: -5 °C ~ -35 °C (± 2 °C)
- Temperatura de la bandeja de congelación: -10 °C ~ -40 °C
- Temperatura del portamuestras de congelación: -5 °C ~ -40 °C (± 2 °C)
- Temperatura del cuchillo de congelación: -5 °C ~ -25 °C
- Rango de espesor de sección
- Espesor de recorte : 1-60um
- Valor de configuración: de 1 a 60 um incremento de 1 um
- Muestra máxima: 55 mm
- Maximum vertical specimen stroke:59mm
- Maximum horizontal specimen stroke :28mm via step motor
- Range of Angle Adjustment of freezing Knife: 0-15°
- Dimension: 600×640×1150mm
- Weight: 120kg
- Power : 220V/110V



Freezing System



Cryostat

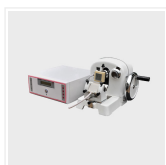

Freezing Microtome...



Freezing Microtome...



Freezing Microtome...



Freezing Microtome...



Freezing Microtome...

Jinhua YIDI Medical Appliance CO.,LTD

Eric Sun (Sales Manager)

Email: eric.sun@zjyidi.com/microtomes@gmail.com

Skype: Microtome.Histology

Mobile: +86-15888997075

Tel: +86-579-82472777 82472470

Fax: +86-579-82472470 82472988

Address: Zhejiang province Jinhua City Zhuma Industrial Park

