



中文 España Inglés

Buscar

CASA


SOBRE NOSOTROS

PRODUCTOS

SERVICIOS

NOTICIAS

CONTÁCTENOS

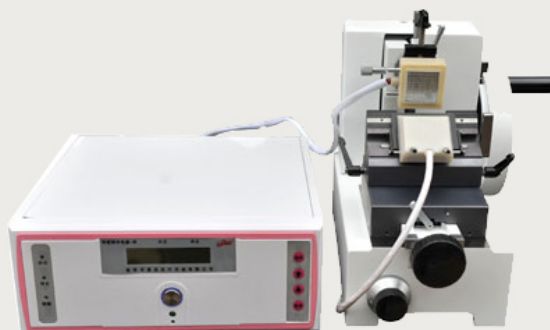

Accurate, Robust, Reliable
YIDI HISTOLOGY EQUIPMENT

MICROTOMO DE CONGELACIÓN

Microtomo de congelación YD-2508III

2013-11-26 10:35:56 1650



Característica de producto :

El micrótopo Roatry YD-2508 es el modelo mejorado sobre la base de la serie YD-1508. Los componentes clave como el riel de guía, el mandril de tornillo, la varilla de trinquete son importados de Japón. La cuchilla de desecho se puede usar directamente, rendimiento perfecto para cortar tejido duro, como plástico, fibra, hueso, planta, cabello. El Microtomo tiene sistema de alarma.

Datos técnicos:

- 1) Rango de espesor de la sección: 1-40 μm
- 2) Valor mínimo de configuración: 1 μm
- 3) Error de precisión: $\pm 5\%$
- 4) Tamaño máximo de la sección: 60 \times 40 mm
- 5) Dimensión: 400 \times 350 \times 350 mm



Sistema de congelación YD-III

Descripción del producto

El sistema se utiliza ampliamente en hospitales, prevención de epidemias, agricultura, silvicultura y otras instituciones de investigación científica. Se compone de tercera refrigeración de semiconductores de potencia termostática computarizada avanzada, Cryo-Scalpel, Cryo-console. El poder está hecho de material nanométrico avanzado, tiene las características de luz, sin ruido. La pantalla LCD puede mostrar la temperatura del Cryo-bisturí y la Cryo-consola al mismo tiempo.

El sistema tiene las características de funcionar de manera uniforme, congelarse rápidamente y funcionar de manera fácil, estable y conveniente. Puede evitar la posición en la que es difícil controlar la temperatura de la crioconsola y el criobisturí de modo que dañe el tejido y no pueda analizarlo. El ángulo entre la crioconsola y el criobisturí es de 45 °, lo que hace que el tejido se adhiera fácilmente al corte.

Además de la loncha de congelación rápida, el sistema también se puede cortar en parafina regular.

Datos técnicos:

- 1) Rango de espesor de la rebanada: 1-60 micras (335III, YD-315III, YD-355ATIII)
- 1-35 micrones (2508 III)
- 1-30 micrones (1508A III / 1508RIII / 2508 III)
- 1-25 micrones (202AIII / 202 III / 2508 III)
- 2) Graduación de ajuste de rebanada mínima: 1 micra
- 3) Sección máxima de corte: 40 × 50μ M 40 × 30μ M
- 4) Área máxima de almacenamiento en frío: 40 × 32 μ M
- 5) La pantalla LCD muestra la temperatura de la crioconsola y la simultaneidad del criobisturí
- 6) diferencia máxima en la temperatura de la etapa de congelación ≥ 60 °C
- 7) diferencia máxima de temperatura de la cuchilla de enfriamiento ≥ 50 °C
- 8) recuperación automática del estado de funcionamiento de la refrigeración después del descongelamiento
- 9) Después de la descongelación automática, tarda de 4 a 8 minutos en alcanzar la temperatura de ajuste



Sistema de conge...



Criostato



Microtomo de conge...



Microtomo de conge...



Microtomo de conge...



Microtomo de conge...



Criostato YD-1900

Jinhua YIDI Medical Appliance CO., LTD

Eric Sun (Gerente de ventas)

Correo electrónico: eric.sun @ zjyidi.com / microtomes @ gmail.com

Skype: Microtomo. Histologia

Móvil: + 86-15888997075

Tel: + 86-579-82472777 82472470

Envíe por fax: + 86-579-82472470 82472988

Dirección: Parque industrial de Zhuma de la ciudad de Jinhua de la provincia de Zhejiang

